

Placa de Montagem Trilho



bio.art
soluções inteligentes

CE

MANUAL DO USUÁRIO



ÍNDICE

- 1-Introdução
- 2-Conteúdo da embalagem
- 3-Instruções de uso
- 4-Problemas e soluções
- 5-Manutenção e limpeza
- 6-Especificações técnicas
- 7-Precauções de segurança
- 8-Condições especiais de armazenamento
- 9-Simbologia
- 10-Termos de garantia e assistência técnica
- 11-Assistência Técnica autorizada
- 12-Representação autorizada na Europa



1 - INTRODUÇÃO



Antes de utilizar a Placa de montagem trilho, leia atentamente todas as informações contidas neste manual de instruções.

A Placa de Montagem Trilho Bio-Art foi desenvolvida especialmente para possibilitar a remoção do modelo de gesso sem a necessidade de quebrá-lo, o que acontece com a maioria das placas de montagem convencionais


2 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1-Uma placa de montagem trilho;
- 1-Manual de instruções.

3 - INSTRUÇÕES DE USO

A Placa de montagem trilho foi desenvolvida para ser instalada sobre a base do ramo inferior ou superior do articulador. Sua fixação é feita através de ímã encaixando-a nos pinos dos ramos.

A Placa de Montagem Trilho permite com facilidade a montagem e a remoção dos modelos sem a destruição do gesso utilizado na transferência do registro.

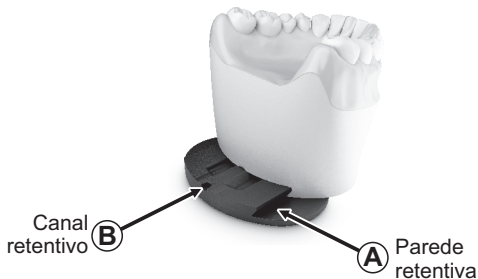



Para um funcionamento adequado, deve-se tomar alguns cuidados na montagem e retirada do modelo, conforme procedimento:

- 1) Durante a montagem, coloque gesso preenchendo todo o espaço interno formado entre as paredes retentivas (A) e a base do design trilho, garantindo uma melhor retenção do modelo;
- 2) O acabamento do modelo na borda lateral da placa de montagem, deverá ficar isenta de gesso em toda sua extensão, para garantir seu destacamento e deslizamento durante a retirada;
- 3) Antes da retirada do modelo, deve-se remover o gesso contido no canal retentivo (B) da placa utilizando ferramenta pontiaguda (ex.: Lecron). Este orifício de retenção tem a função de evitar que o modelo saia espontaneamente da placa de montagem durante o trabalho com articulador;
- 4) Depois de retirado todo o gesso contido no orifício de retenção, deve-se segurar firmemente o modelo e aplicar uma pequena batida na borda da placa obedecendo o sentido indicado pelas setas localizadas na face inferior da placa. Esta operação fará com que a placa se destaque do gesso e fique livre para que possa deslizar facilmente para fora do modelo.

Obs.: Uma vez retirado o modelo da placa de montagem trilho, não garantimos a sua recolocação com a mesma precisão da posição inicial de trabalho, já que esta depende totalmente da qualidade técnica do trabalho bem como da qualidade dos materiais utilizados no processo (gesso).

Atenção!



Os procedimentos relacionados à instalação e montagem dos modelos no articulador, bem como o manuseio do mesmo, são exclusivos da técnica utilizada pelo profissional. Qualquer problema ou falha técnica proveniente do uso incorreto ou instalação indevida do equipamento é de total responsabilidade do profissional.



4 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Placa de montagem trilho com força de fixação fraca.	Acúmulo de resíduos entre as faces de contato de fixação.	Limpe as faces de contato entre a placa corretamente.
Dificuldade de retirar o modelo da Placa.	Placa com imperfeições ou deformações	A Placa deformada deve ser substituída.
	Qualidade do gesso	Use sempre gesso de qualidade comprovada.

5 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A Placa de montagem trilho, devem ser lavadas exclusivamente com água e detergente neutro e sempre mantenha o produto completamente seco. Para a limpeza, nunca utilize solventes ou espátulas metálicas.

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material:

Placa injetada: PA 6 + 30 % fibra de vidro.

Inserto metálico: Aço Inox SAE-420.

Peso da Placa injetada com inserto: 22 gramas, ($\pm 10\%$).

7 - PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém somente as informações básicas e simplificadas com relação ao produto, as quais não substituem o devido curso e treinamento. A Placa de montagem trilho constitui um produto destinado ao uso somente por profissionais especialmente qualificados na área, ficando estes totalmente responsáveis pela técnica utilizada.



8 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

Quando não utilizadas, guarde as Placas de montagem trilho em local seco, isento de poeira, distantes de produtos químicos e longe de fontes de calor excessivo e luz solar direta.

9 - SIMBOLOGIA



10 - TERMOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da fatura de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do



defeito e número serial do produto;

- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

Limitações da garantia:

- Desgaste natural de peças;
- Mau-uso, quedas ou sinistros;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Teotônio Vilela, 120 – Jardim Tangará

CEP 13568-000 – São Carlos – SP – Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502 – Fax +55 (16) 3372-5953

CNPJ 58.538.372/0001-56 – Insc. Estadual 637.034.447.113

www.bioart.com.br

11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site: www.bioart.com.br

12 - REPRESENTANTE AUTORIZADO NA EUROPA

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net

EC REP



**Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos**